

Pflegebett AYLEEN



Inhalt

Das Basis-Pflegebett AYLEEN	3
Stufenlose Höhenverstellung	6
Liegeflächen	7
Bettfronten	8
Holzreplikationen	9
Zubehör	10
Ausstattungen und Optionen	11
Technische Angaben	11

Das Basis-Pflegebett AYLEEN

Das Pflegebett AYLEEN stellt eine preiswerte Alternative zum IMPULSE Premium-Pflegebett dar. Die vier Editionen unterscheiden sich primär in der Ausführung des Fahrgestells und ermöglichen dadurch die einfache Adaption des Basis-Pflegebettes AYLEEN an die vielfältigen Anwendungsbereiche der stationären Pflege oder der Pflege zu Hause.

AYLEEN – die Vorzüge:

- Autokontur-Position der 4-geteilten Liegefläche
- intuitiv bedienbarer Handschalter mit Sperrfunktion
- optional wählbare Bettfronten-Designs
- Vielfalt an natürlich wirkenden Holzreplikationen

- Holzbau Halifax Eiche natur (aufpreispflichtiges Sonderdekor)
- Bettfronten V450
- durchgehende Seitengitter beidseitig



AYLEEN Edition 400 HC

Pflegebett mit reduziertem Packmaß

100 mm Laufrollen mit Einzelradfeststellung sorgen beim Basis-Pflegebett AYLEEN Edition 400 HC für eine gute Rangierfähigkeit. Stufenlos höhenverstellbar von 40 bis 80 cm* bildet der mobile Allrounder den Einstieg in die stationäre und häusliche Pflege. Die wohnliche Holzoptik des Bettumbaus ist individuell in Anlehnung an die be-

stehende Raumausstattung konfigurierbar. Ein geringes Eigengewicht und die teilbare Liegefläche ermöglichen ein perfektes Handling beim Transport des Bettes. Die Edition 400 HC ist mit nur einer Person in kürzester Zeit bereit für den Pflegeeinsatz.

* gemessen an der Oberkante der Liegefläche

Sturzprophylaxe

- Holzumbau Halifax Eiche natur (aufpreispflichtiges Sonderdekor)
- Bettfronten V450
- durchgehende Seitengitter beidseitig



AYLEEN Edition 400 N

Transportoptimiertes Niedrigpflegebett

Mit einer Niedrigposition von nur 27 cm* ist das Niedrigpflegebett AYLEEN Edition 400 N zur Sturzprophylaxe geeignet. Diese Funktion findet gerne als Alternative zu freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Risikogruppen Anwendung. Durch die niedrige Lagerungshöhe besteht

ein deutlich vermindertes Verletzungsrisiko, sollte die Bewohnerin oder der Bewohner aus dem Bett rollen. Das kompakte Maß der teilbaren Liegefläche fördert einen sicheren Transport – selbst in engen Treppenhäusern oder kleinen Wohnungen.

* gemessen an der Oberkante der Liegefläche

Der intuitive Handschalter am AYLEEN ermöglicht eine schnelle, elektromotrische Höhen- und Liegeflächenverstellung.



Stabilität für besondere Herausforderungen

AYLEEN Edition XL

Das Schwerlast-Pflegebett

Die Edition XL des Pflegebettes AYLEEN ist mit einer sicheren Arbeitslast von 300kg insbesondere für adipöse Bewohnerinnen und Bewohner ausgelegt. Das verstärkte Fahrgestell mit 6 Doppelaufrollen in Kombination mit einer äußerst robusten, fest verschweißten Metallgitter-Liegefläche und 2 Schwerlast-Hubmotoren wird höchsten Ansprüchen an Stabilität und Sicherheit gerecht.


- Holzumbau Kirsche Havanna
- Bettfronten V409
- durchgehende Seitengitter beidseitig



Flexibilität bei der Pflege Zuhause

AYLEEN Edition 500

Das Pflegebett AYLEEN Edition 500 ist für den Einsatz in bestehende Bettrahmen konzipiert. Der Einbaurahmen wird an Stelle eines Lattenrosts eingepasst und erweitert das klassische Bett um die Funktionen eines elektrisch verstellbaren Pflegebettes. Mit einer sicheren Arbeitslast von 180kg bietet das System eine hervorragende Stabilität.

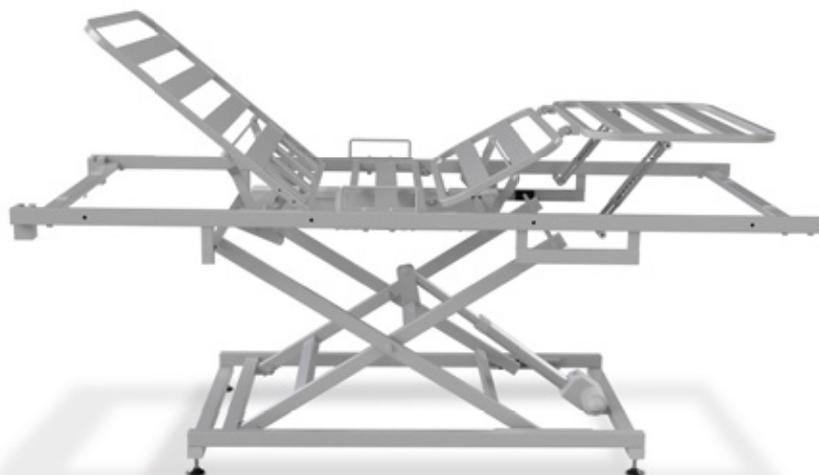

Stufenlose Höhenverstellung

Die Liegefläche des Basis-Pflegebettes AYLEEN ist stufenlos in der Höhe verstellbar und somit perfekt auf die Pflegesituation adaptierbar.



Die Autokontur-Position

Durch die synchrone Verstellung von Rückenlehne und Oberschenkelauflage gelangt die Bewohnerin oder der Bewohner in eine bequeme, aufgerichtete Liegeposition. Ideal zum Lesen oder Fernsehen.

Liegeflächen

Als Basisvariante am Pflegebett AYLEEN bietet die 4-geteilte Metalllamellen-Liegefläche eine gute Ergonomie und komfortable Liegepositionen. Die pulverbeschichteten Elemente sind einfach zu reinigen und unterstützen einen guten Luft- und Feuchtigkeits-transfer der Matratze.

Die optional erhältliche Metallgitter-Liegefläche verfügt über entnehmbare Gitterelemente – für eine einfache Reinigung und Desinfektion sowie optimale Zugänglichkeit beim Service der Pflegebetten. Die robuste Konstruktion bietet erhöhte Stabilität und überzeugt mit sehr guten Belüftungseigenschaften.



Metallgitter-Liegefläche (optional)



Metalllamellen-Liegefläche

Bettfronten

Standardmäßig ist das Pflegebett AYLEEN mit der Bettfront V409 ausgestattet. 5 weitere attraktive Designs stehen optional zur Auswahl. Kombiniert mit authentischen Holzreplikationen (Seite 9), genießen Sie kreativen Freiraum in der Ausgestaltung Ihres Projektes.

Bettfront V409



Bettfront V408 (optional)



Serie V450 (optional)



Serie V470 (optional)



Serie V480 (optional)



Serie V490 (optional)



Holzreplikationen



Buche gedämpft R24034



Altmühlbuche R24006



Bergahorn R27024



Eiche Milano R20095




Sonoma Eiche hell R20128



Sonoma Eiche trüffel R20031



Kirsche Havanna R42006

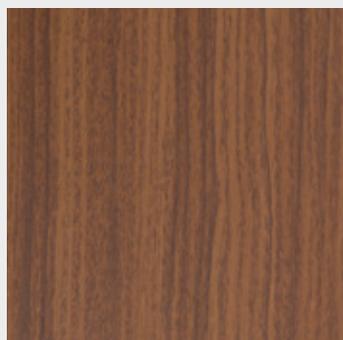

Nussbaum Standard R30001



Springfield Oak dunkel R20234

Bei der Dekorauswahl handelt es sich um Reproduktionen. Farbverbindliche Dekorauswahl nur am Originalmuster möglich. Vorbehaltlich der Verwendung ähnlicher Alternativdekore anderer Hersteller bei Nichtverfügbarkeit.

Zubehör



Aufrichter



Wandabweisrollen



Bettlampe CURA



Nachtschrank WIII



Nachtschrank WI Standard



Server WXL



Unser umfangreiches Zubehörsortiment finden Sie in einem gesonderten Katalog.

Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar per Post. Alternativ steht die PDF-Datei zum Download unter <https://bettenmalsch.com/download> bereit.

Ausstattungen und Optionen

Edition	400 HC	400 N	XL	500
Unterbettbeleuchtung	◦	◦	◦	-
Seitengitter DS	•	•	•	-
Bett-Seitenblende	◦	◦	◦	-
Doppelaufrollen	-	-	100 mm	-
Einzelaufrollen	100 mm	100 mm	-	Tellerfüße
Komfort-Einstiegshöhe	40 cm	27 cm	38 cm	33 cm
Pflegehöhe	80 cm	81 cm	78 cm	78 cm
Autokontur-Position	•	•	•	•
Metallamellen-Liegefläche	•	•	◦	•
Metallgitter-Liegefläche	◦	◦	•	◦
Handscharter mit Sperrfunktion	•	•	•	•

• Standard ◦ optional

Technische Angaben

Maße und Gewichte	Edition 400 HC	Edition 400 N	Edition XL	Edition 500
Liegefläche	90×200 cm	90×200 cm	100×200 cm	90×200 cm
Matratzenmaße	88×200×12 cm	88×200×12 cm	98×200×14 cm	88×200×12 cm
Außenmaße	100×206 cm	100×206 cm	110×206 cm	90×200 cm
Sichere Arbeitslast	max. 180 kg	max. 180 kg	max. 300 kg	max. 180 kg
Unterfahrbarkeit	12 cm	14,5 cm	13 cm	-
Gesamtgewicht mit Bettumbau ohne Zubehör	ca. 100 kg	ca. 100 kg	ca. 160 kg	ca. 80 kg

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel.: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-Mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

